

チェックミービューア (V2.2.4) セットアップ方法

2021年3月


1. セットアップファイルのダウンロード。

ダウンロードページの Checkme_Viewer_2.2.4_setup.zip をクリックします。

※ダウンロードの際のファイルの保存方法は、ご利用のブラウザソフト(Chrome 等)によって異なります。ブラウザソフトの使い方や、ダウンロードファイルの保存方法は、ご利用のブラウザソフトのメーカー様にお問合せください。弊社では詳細な使用方法につきましては、ご案内できかねますので予めご了承ください。

《例: Chrome / Windows10 の場合》

- 1) 「名前を付けて保存」ウィンドウが開きますので、デスクトップを選択して「保存」ボタンを押してください。
※セキュリティの警告が表示された場合も問題ございませんのでダウンロードを実行してください。

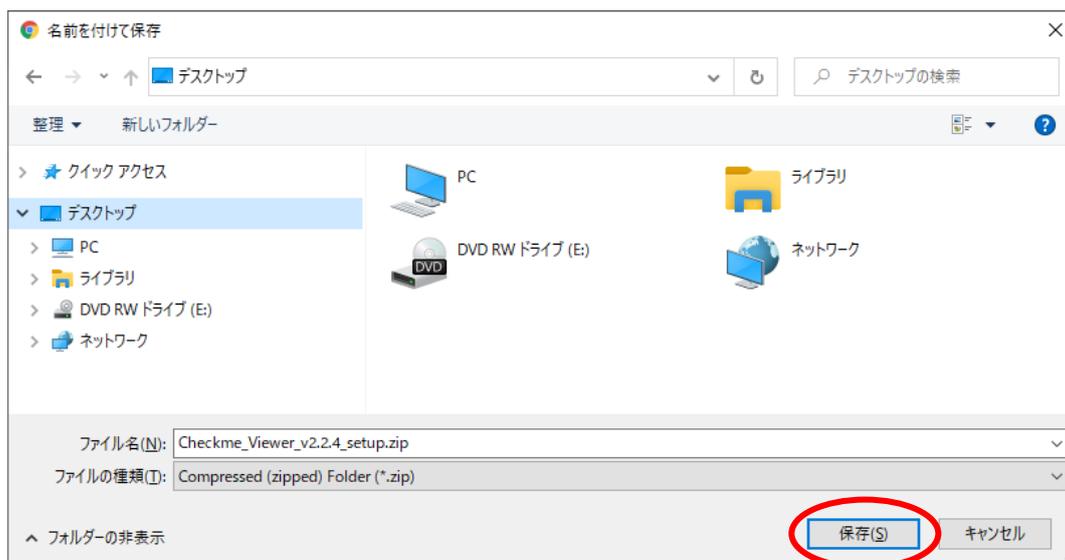

- 2) デスクトップにダウンロードファイルのアイコンが表示されます。




2. ダウンロードしたセットアップファイルを起動する。

①デスクトップの Zip ファイルをダブルクリックします。


②「Checkme_Viewer_v2.2.4.exe」をデスクトップにドラッグします。

(デスクトップ上に解凍します。)

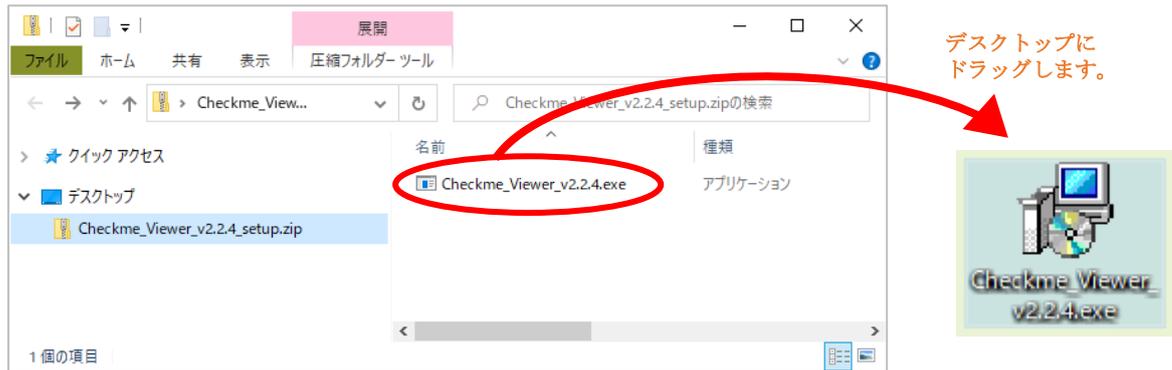


③デスクトップに出した「Checkme_Viewer_v2.2.4.exe」をダブルクリックします。

下の画面が表示された場合、「詳細情報」をクリックし、次の画面で「実行」をクリックしてください。

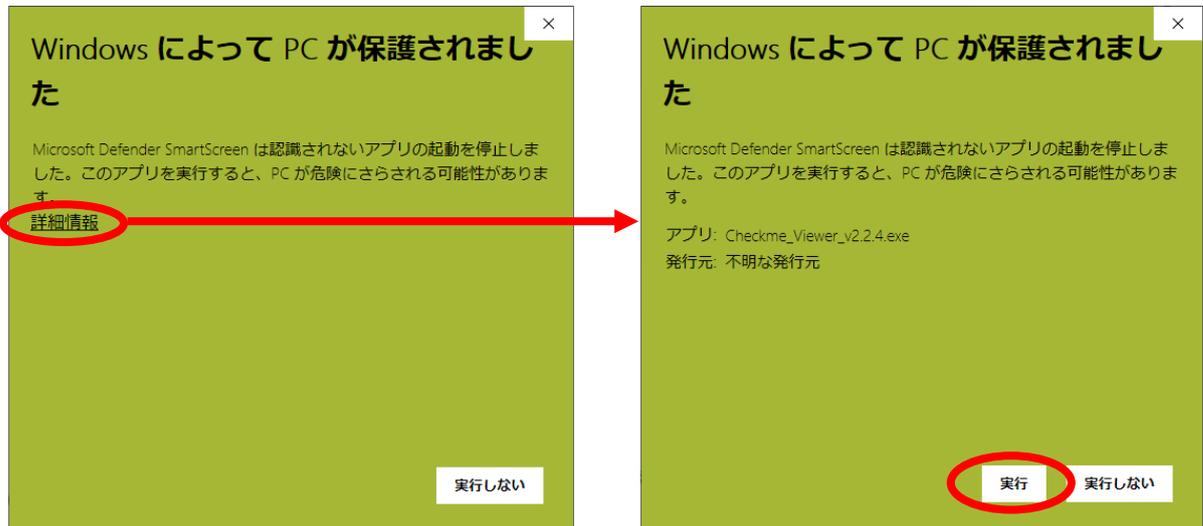


④ここで、ユーザーアカウント制御による「この不明な発行元からのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」の画面が開いた場合は、「はい」を選択してください。


- ⑤ 「インストール先の指定」では、特に別フォルダを指定する必要がなければそのまま「次へ」をクリックしてください。

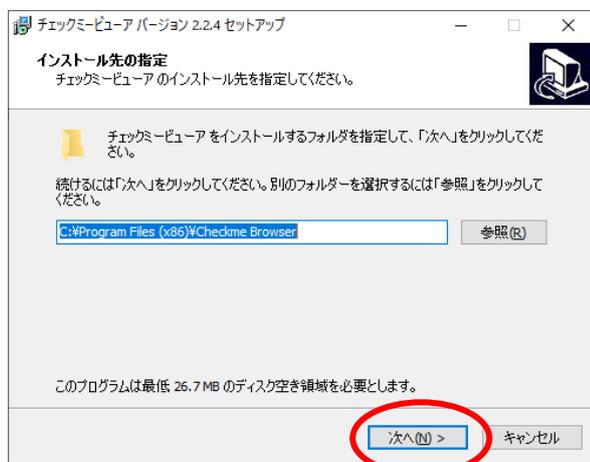


- ⑥ 「コンポーネントの選択」で「次へ」をクリックしてください。

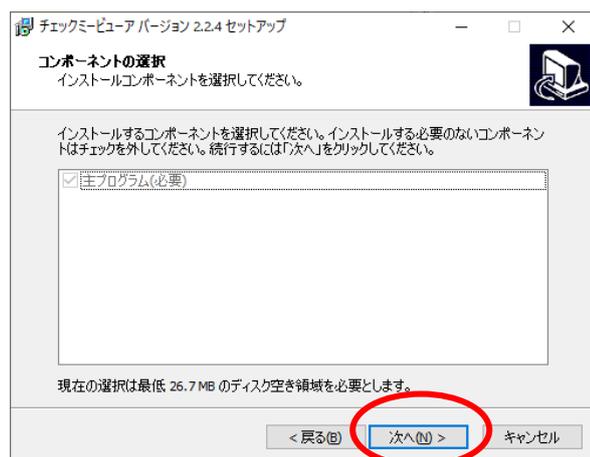


- ⑦ 「プログラムグループの指定」で「次へ」をクリックしてください。

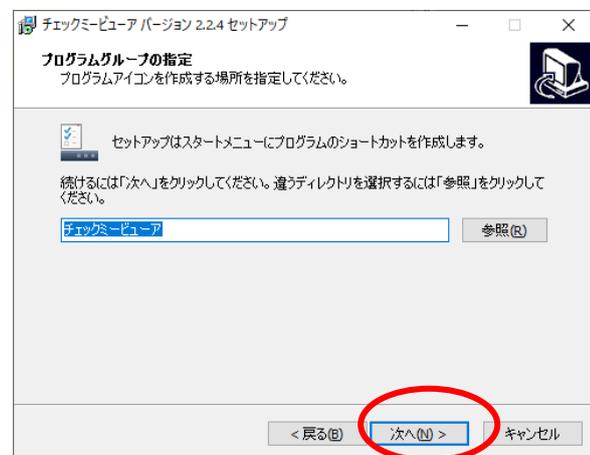


- ⑧ 「デスクトップ上にアイコンを作成する」、「vc++runtime」両方にチェックが付いている状態で「次へ」をクリックします。

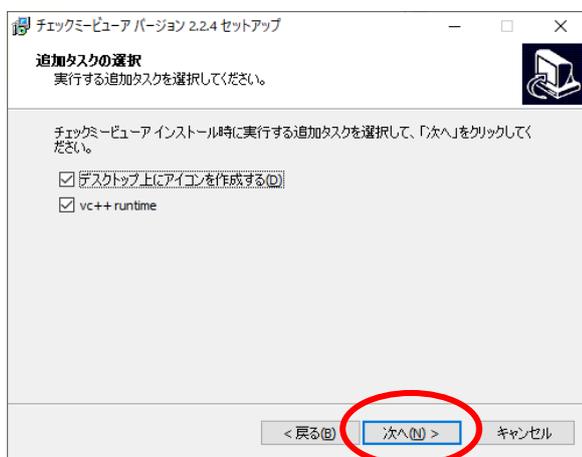



- ⑨ 「インストール準備完了」の画面が表示されましたら、「インストール」をクリックしてください。

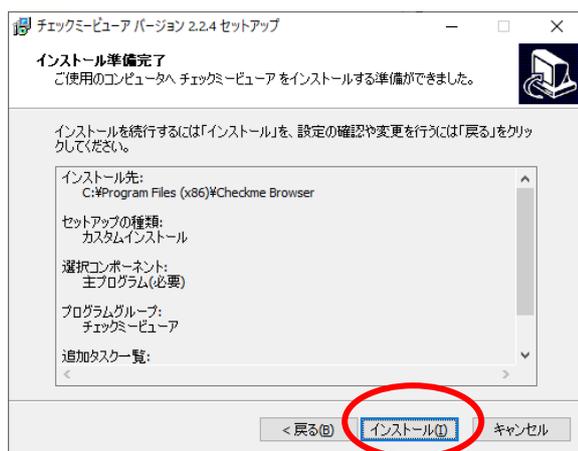



- ⑩ インストールが始まります。

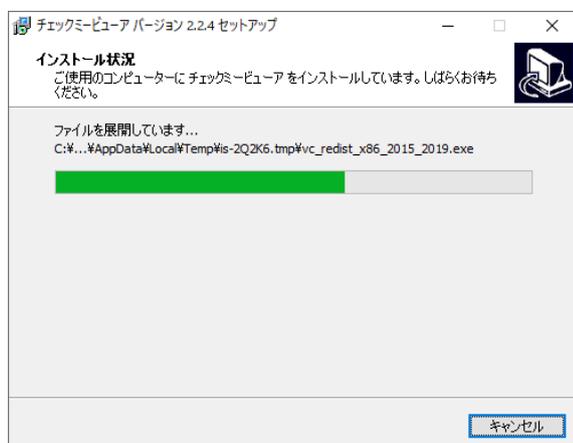


- ⑪ 「Microsoft Visual C++2015-2019」のインストール画面が開きますので、「ライセンス条項および使用条件に同意する」にチェックを入れ、「インストール」をクリックします。

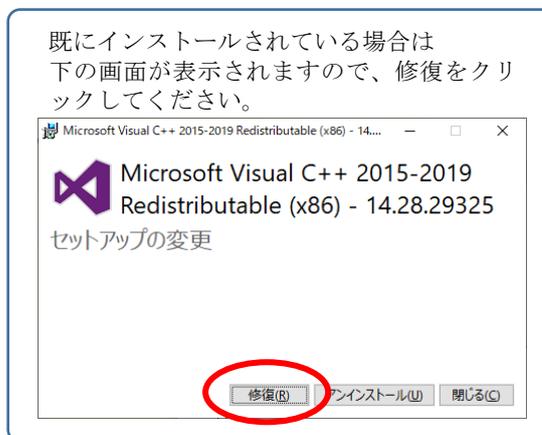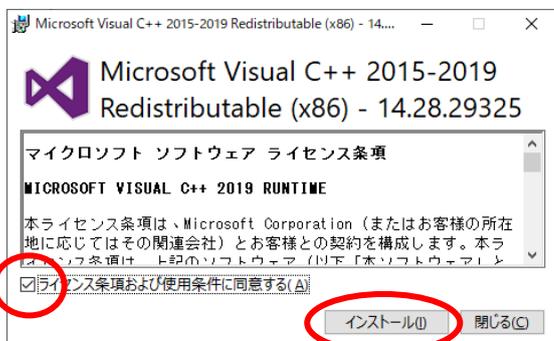

- ⑫ しばらくすると「セットアップ完了」と表示されますので、「閉じる」をクリックします。

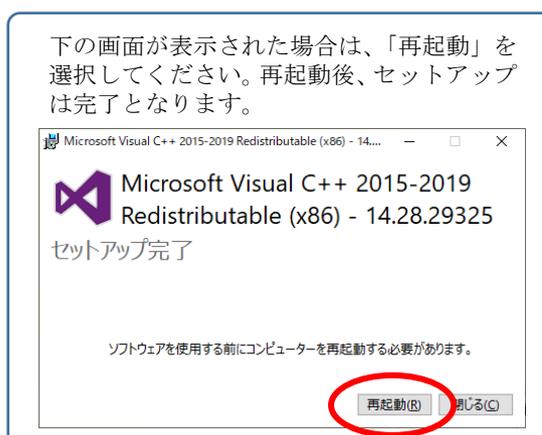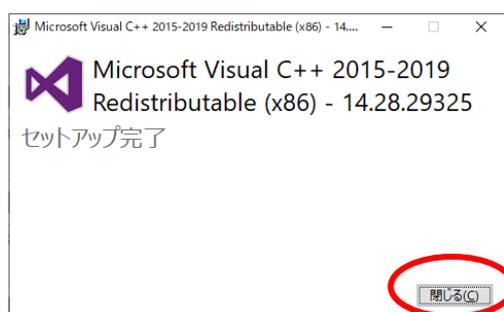

- ⑬ チェックミービューアセットアップウィザードの完了が表示されましたら、「完了」をクリックしてください。

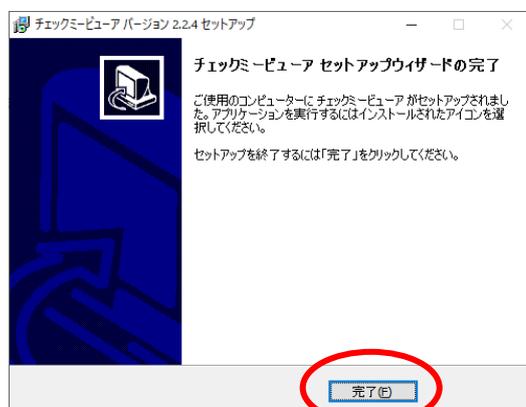

以上でセットアップは終了です。